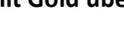


Zu Beginn der Rehabilitationstherapie am Beckenboden wurden einige Sonden entwickelt, von denen die bekanntesten und vielleicht die ersten herauskamen, die V2STW vaginal mit zwei Ringen und die A2STW, anal mit 2 Ringen, beide von Beacmed. Mit dem Fortschritt der Technologie haben sich sowohl die Ausrüstung als auch die Sonden stark weiterentwickelt und stark weiterentwickelt. Gegenwärtig gibt es, auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von zunehmend ausgebildeten Fachleuten in diesem Sektor, viele Sonden auf dem Markt, jede mit Funktionen, die der durchzuführenden Therapie, der Anatomie des Patienten, dem "Komfort", der Pathologie usw.

ANALSONDEN												
VORLAGE	BEZEICHNUNG	Kanäle	ELEKTRODEN				Material	Länge mm	Gewicht gr	EIGENSCHAFTEN	VERWENDEN	
			n	Form	Ø max							
	A2STW	standard	1	2	Ring	15	gold	110	25	mit Griff zur möglichen Anpassung der Position während der Sitzung Abgerundete Ogive, um die Einführung zu erleichtern	normale Anatomien	
	ANALIS	standard	1	2	platte	15	gold	140	13	Mit Griff mit 3 Ringen zum Einstellen und Stoppen der Sonde nach dem Einführen. Konische Ogive noch atraumatischer	normale Anatomie - asymmetrische Schließmuskeln (aufgrund einer Operation oder anderer). Tatsächlich ermöglichen die seitlichen Elektroden eine bessere Anpassung der Sonde, indem Sie sie drehen, damit sie in dem Fach mit besserer Muskulatur funktioniert	
	ARROW	konische und kurze Form	1	2	platte		Metall	45	23,5	Mit einem kleinen Endring kann es auch als kleine Vagina verwendet werden	kurze Schließmuskeln, bei denen die Einführung nicht angepasst werden muss	
	ANUS PROBE	mit Endplatte	1	2	Ring	15	Metall	63	22	dünne Elektroden, dicht beieinander und zurückversetzt, lassen den einführenden Teil der Sonde frei, damit dieser bis zur Endplatte gut eingeführt werden kann. Die Sonde ist glatt und an der Spitze etwas breiter, um das Risiko eines Auswurfs zu verringern	normale Anatomien	
	RECTAL		1	2	Ring	14	Metall	83	25	Röhrenform mit zentraler Vertiefung, an deren Rändern sich sehr dünne Elektroden befinden	hypertonische und schmerzende Sphinkter	
	SPRING 201	mit verstellbarer Platte	1	2	Ring	19	Metall	da 65 a 105	25	verstellbare Platte für bessere Positionierung und Anschlag. Röhrenform mit breiten Elektroden und atraumatischer konischer Ogive.	normale Anatomien	
	PERI SPHERA-A	2 Kanäle mit Stellungsregler	2	4	platte	19	gold	60/1 20	24	verstellbare Stange einschiebbare Länge 60 mm - gesamt 120 mm	Sonde, die entwickelt wurde, um den Mann zu behandeln, da die geschnittene Ogive auf dem Prostatabereich aufliegt, was sie weniger nervig macht	
	RECTALIS Drucksonde	2-Ballon-Druck, um manometrischen BFB durchzuführen. Diese Sonde kann mit speziellen Geräten zum Nachweis des manometrischen BFB oder allein mit der mitgelieferten Spritze verwendet werden.										
	RECTOMAX Drucksonde	2-Ballon-Drucksonde zur Durchführung von manometrischen BFB. Diese Sonde kann mit speziellen Geräten zum Nachweis des manometrischen BFB oder allein mit der mitgelieferten Spritze verwendet werden. Sonde mit hochwertigen Materialien hergestellt, die sie im Laufe der Zeit haltbarer machen.										

VAGINALSONDEN

VORLAGE	BEZEICHNUNG	K a n n.	n.	ELEKTRODEN			Län ge mm	Ge wic ht	EIGENSCHAFTEN	VERWENDEN	
				Form	∅ max	Mat erial					
	V2STW	standard	1	2	Ring	25	gold	110	33	mit Griff zur möglichen Anpassung der Position während der Sitzung	normale Anatomien
	CLASSICA	Standard gerade	1	2	U	25	gold	110	37	mit Griff zur möglichen Anpassung der Position während der Sitzung die U-Form dient nicht dazu, die Harnröhre zu stimulieren, sondern geht durch die Öffnungen	normale Anatomien Patienten mit Harnröhrenerkrankungen oder -empfindlichkeiten
	MINIMA	tampon	1	2	Kugel form	26	gold	65	16	ohne Griff die "tampon"-Form hilft, Ärger zu reduzieren, da sie vollständig eingesetzt werden kann	Behandlung von leichten Unterbauchschmerzen (Vulvodynie etc.) Patienten, die während des BFB mit dieser Sonde die zu verrichtende aktive Arbeit besser verstehen, da sie keinen "Fremdkörper" aus der Vulva spüren.
	PERISPHERA-O		1	2	Kugel form	26	gold	57/ 120	22	mit Griff und verstellbarer Platte um es besser zu positionieren. Einführbare Länge 57 mm - insgesamt 120 mm	
	PLUGGY	kurz gerade und glatt	1	2	platte	26	Me tall	87	35	mit Endplatte	kurze Anatomien nicht zu breit, da sie während der Behandlung herausfallen könnten
	POLLY	kurz, Birnenform	1	2	seitlich	28	Me tall	76	20	mit Endplatte	relativ offene kurze Anatomien, da Durchmesser und Form dieser Sonde die tenuta in situ
	RING	kurz, eiförmig, in der Mitte	1	2	seitlich	34	Me tall	78	20	mit Endplatte	kurze Anatomien, offene Vagina, da der massive Durchmesser und die Form dieser Sonde die Abdichtung vor Ort gut unterstützen
	JOYSTICK	Standard, gerade und glatt	1	2	Ring	25	Me tall	130	80	mit Griff besser positionieren und vor Ort halten	offene Vagina mit normaler Anatomie
	ATRESICA-S	Kurz, tampon	1	2	Ring	20	Me tall	53	58	die "tampon"-Form hilft, Ärger zu reduzieren, da sie vollständig eingesetzt werden kann	atresische Vaginas
	ATRESICA-L	gerade und glatt	1	2	Ring	20	Me tall	100	72	mit Griff zum besseren Positionieren und Festhalten	atresische Vaginas
	V2STFW	für SEF und BFB	1	2	Ring	25	gold	110	35	mit einem medizinischen Silikonballon ausgestattet, muss er mit speziellen Geräten zur Erkennung des manometrischen BFB . verwendet werden	Patienten, die in der Lage sind, die zu erledigende Arbeit besser zu verstehen, haben das Gefühl, dass sie sich etwas zusammenziehen, das auf die Aktion reagiert, daher ist die Übung realistischer.
	VBTF	für BFB	1	--	--	35	--	110	35		
	PERISPHERA-H		2	4	Sattel förmige	30	gold	60/ 120	13	mit dünnem Griff zum Einführen und zur Wartung vor Ort, der dazu beiträgt, der Sonde eine größere Physiologie zu verleihen und weniger Beschwerden zu verursachen. Einführbare Länge 60 mm - gesamt 120 mm	Patienten mit Harnröhrenerkrankungen oder – empfindlichkeiten. Durch die spezielle Form der seitlich und horizontal übereinander angeordneten Elektroden haften sie besser an den Wänden und ihre Anordnung vermeidet Berührungen und Reizungen der Harnröhre.
	PERISIZE 4	Wäsche klammer	2	4	kugel		gold	110	20	die Einführung erfolgt durch Drücken der Sonde, die nach dem Loslassen perfekt an den Wänden haftet	offene Vagina auch bei leichtem Prolaps, da die sehr abgeflachte Form die Positionierung erleichtert
	PERISPHERA-U	flache	2	4	flache	30	gold	60/ 120	23	Einführbare Länge 60 mm - gesamt 120 mm	Die sehr flache Form macht es ideal für die Arbeit an Patienten mit Prolaps
	PERISPHERA-AT	gerade	2	4	platte	11	gold	60/ 120	23	verstellbarer Stellungsregler dünnste Sonde die es gibt Einführbare Länge 60 mm - gesamt 120 mm	atresische Vagina bei der Behandlung von Unterleibsschmerzen, auch akzentuiert (Vaginismus, Vulvodynien, etc.) oder für Jungfrauen

* Die mit Gold überzogenen Elektroden machen das Produkt hypoallergen, die Metallelektroden enthalten einen geringen Anteil an Nickel.

ELEKTROSTIMULATOREN UND / ODER BIOFEEDBACK

	n. Kanäle	STROM			BFB			Anorekt Manom. Untersuchung	Bildschirm	Kabellos	Doc k St.	Softwareaktivierungslizenz	PROGRAMME					einschließlich Zubehör	
		STIM	TENS	ETS	EM G	PRE S	Spiele						Inkontinenz	rehab	sport	frei	n. Sitzungen		
ELETTROSTIMULATORI DOMICILIARI																			
	BIOLITO	2	C-M-B	H	--	--	--	--	s/w	--	--	--	5	--	--	1	1/5	Elektroden n.4 40x40 n.4 40x80	
	CONTINENCE	2	C - LR	--	--	--	--	--	s/w	--	--	--	9	--	--	4	1		
	PELVITONE	2	C-LR-M	--	--	--	--	--	s/w	--	--	--	11	--	--	3	1/5		
	EVOSTIM-UG	2	C - LR	--	--	--	--	--	s/w	--	--	--	5	--	--	50	1/10	Vaginalsonde MINIMA	
BIOFEEDBACK DOMICILIARI																			
	SIMPLEX	1	--	--	--	ja	--	--	s/w	--	--	ja	--	--	--	--	--	-	
	EVOSTIM-P	2	C - LR	--	ja	--	ja	--	s/w	--	--	--	5	--	--	--	--	Vaginaldrucksonde V2STFW	
	EVOSTIM-E	2	C - LR	--	ja	ja	--	--	s/w	--	--	--	5	--	--	--	--	Vaginalsonde PERISPHERA-O Elekt n.4 40x40	
PROFESSIONALI DI BASE																			
	PRO	1	ja	C - M	ja	ja	--	ja	--	farb. touch	ja	--	ja	22	25	--	12	5	
	2	2	ja	C - M	ja	ja	--	auf pc	--	s/w	ja	--	ja	19	9	21	11	5	
	2 PRO	2	ja	C - M	ja	ja	--	Si	--	farb. touch	ja	--	ja	19	9	21	32	5	
	4	4	ja	C - M	ja	ja	--	Auf pc	--	s/w	ja	--	ja	19	9	21	11	5	
	4 PRO	4	ja	C - M	ja	ja	--	Si	--	farb. touch	ja	--	ja	19	9	21	32	5	
PROFESSIONALI																			
	NANO URO	2	ja	C - LR	ja	ja	opt.	--	--	Tablet 8"	ja	--	Installiert auf Tablette	A*	--	--	--	ja	4 elektroden 50x50
	NANO FISIO	2	ja	C-LR-M	ja	ja	opt.	--	--	Farbe n	ja	--	Installiert auf Tablette	--	--	B*	ja	ja	
	NANO FISIO - URO	2	ja	C-LR-M	ja	ja	opt.	--	--	n	ja	--	Installiert auf Tablette	A* + B*	--	--	ja	ja	
	MICRO ARM	2	ja	C-LR-M	ja	ja	opt.	--	ja	--	ja	1	Installieren auf deinem PC	Anorektale Manometrie	--	--	ja	ja	Pedalmanometrisches Modul - Spritze
	MICRO BASE	2	ja	C - LR	ja	ja	opt.	ja	opz su ver. av.	--	ja	1	Installieren auf deinem PC	A*	--	--	--	ja	
	NEO	2	ja	C-LR-M	ja	ja	opt.	ja	opzionale	--	ja	3	Installieren auf deinem PC	A* + B*	--	--	ja	ja	
	LIBERTY	2	ja	C-LR-M	ja	ja	opt.	ja	opzionale	Pc touch	ja	4	Inst. auf PC-Touch	A* + B*	--	--	ja	ja	
	TOTEM-UG	2+2	ja	C - LR	-	ja	ja	--	--	--	ja	--	Von Inst. auf dem PC	54	--	--	ja	ja	2 Vaginalsonden Combicom N.4 elektroden

C = Gleichstrom LR = Arbeitsstütze M = moduliert B = Burst H = han

A * = 26 Anorektaler Sphinkterperineum - 40 Genitaler Harnsphinkterperineum

B * = 7 Amyotrophe - 9 Muskelkontrakturen - 2 dermatologische - 3 Schwangerschaft - 6 neurologische - 4 osteoartikulär und sehnen - 24 posttraumatisch - 2 respiratorisch - 24 rheumatologisch - 16 Sportarten

Eigenschaften und technische Daten können abweichen

- REHABILITATION DES BECKENBODENS

Vaginalsonden

Analsonden

Haushaltsgeräte

Grundlegende professionelle Geräte

Professionelle Systeme

- URODYNAMIK

- UROFLUXOMETRIE

- PROKTOLOGIE

- ENDOSKOPIE

- GASTROENTEROLOGIE

- NEUROLOGIE



Medizinische Leistungen und Materialien

*Technische Daten und
Auswahlhilfe*



*Besuchen Sie unsere Seite
www.meditaliaservice.com*

info@meditaliaservice.com 

www.meditaliaservice.com 

+39 3314605453 